

Manual de uso do produto

Extrator de canabinóides ultrassônico



2022

1- Uso do Produto



1.1 Primeiros Passos



Baixar o aplicativo .



Entrar em contato com o fabricante para realizar o cadastro para login "usuário" e "senha" para garantir acesso ao aplicativo.

1.2 Para Iniciar a extração



Conecte o cabo do produto em uma tomada de 220 V.

Ligue o interruptor localizado na tampa metálica.

1.3 Informações de Login

The image displays two mobile application screens for login. Both screens feature a dark background and a logo at the top center, which consists of a green cannabis leaf inside a white circle with a green border. The left screen, titled 'Tela_Login', has a back arrow in the top left corner. It contains three white input fields: 'Tipo de Cliente' (a dropdown menu), 'Usuário', and 'Senha'. Below the 'Senha' field is a link 'Esqueceu a senha?' and a large green 'ENTRAR' button. The right screen, titled 'Escolha_Perfil', also has a back arrow. It features the same logo and a dropdown menu for 'Tipo de Cliente' with 'Empresa' and 'Laboratório' as options. Below this is a 'Senha' field, a link 'Esqueceu a senha?', and a large green 'ENTRAR' button.

Na tela do aplicativo escolha seu tipo de cliente e coloque seus dados de usuário e senha enviados via e-mail.

1.4 Informações do cliente Laboratório

O cliente do tipo Laboratório deve clicar em "Cadastrar Lote" para escolher um perfil de extração conforme imagens abaixo.

The image displays five mobile application screens for a Laboratory client, arranged in two rows. The top row contains three screens, and the bottom row contains two.

- Screen 1 (Top Left):** Titled "HOME LABORATÓRIO". It features a logo with a green leaf and a pair of scissors. Below the logo is a "Tipo de Cliente" dropdown menu set to "Laboratório". There are input fields for "Usuário" (containing "User_Lab") and "Senha" (containing "*****"). A link "Esqueceu a senha?" is below the password field. A red "ENTRAR" button is at the bottom.
- Screen 2 (Top Middle):** Titled "HOME LABORATÓRIO" with a "Sair" option in the top right. It shows a profile section with a green circle icon and the text "Nome do Laboratório". Below is a search bar "Pesquisar Lote" with a magnifying glass icon. A list of lots is shown, each with a green checkmark icon and a lot number: "Lote 00001", "Lote 00002", "Lote 00003", and "Lote 00004". A red "CADASTRAR LOTE" button is at the bottom.
- Screen 3 (Top Right):** Titled "PERFIS DE EXTRAÇÃO". It shows three green circular icons labeled "PERFIL 1", "PERFIL 2", and "PERFIL 3". A red "SELECIONAR PERFIL" button is at the bottom.
- Screen 4 (Bottom Left):** Titled "PERFIL DE EXTRAÇÃO". It shows four green circular icons labeled "TEMPERATURA", "TEMPO", "POTENCIA", and "VELOCIDADE DO MOTOR". A red "Cadastrar lote" button is at the bottom.
- Screen 5 (Bottom Right):** Titled "CADASTRO DE LOTE". It has input fields for "Identificação do Lote", "Responsável pela produção", "Local de remessa", and a dropdown for "Perfil de extração". Red "SALVAR" and "CANCELAR" buttons are at the bottom.

1.4 Informações do cliente Laboratório

No "Perfil de Extração" escolha os dados:

- 1- Temperatura
- 2- Tempo total de extração
- 3- Velocidade do motor (agitador)

Em "Cadastro de lote" identifique:


- 1- Número do Lote
- 2- Responsável pela Produção
- 3- Local de remessa do produto
- 4- Tipo de perfil usado

O aplicativo enviará o perfil de extração escolhido para a ESP32.

Após a finalização da extração, o usuário terá acesso à um relatório do aplicativo.



1.5 Informações do cliente Empresa

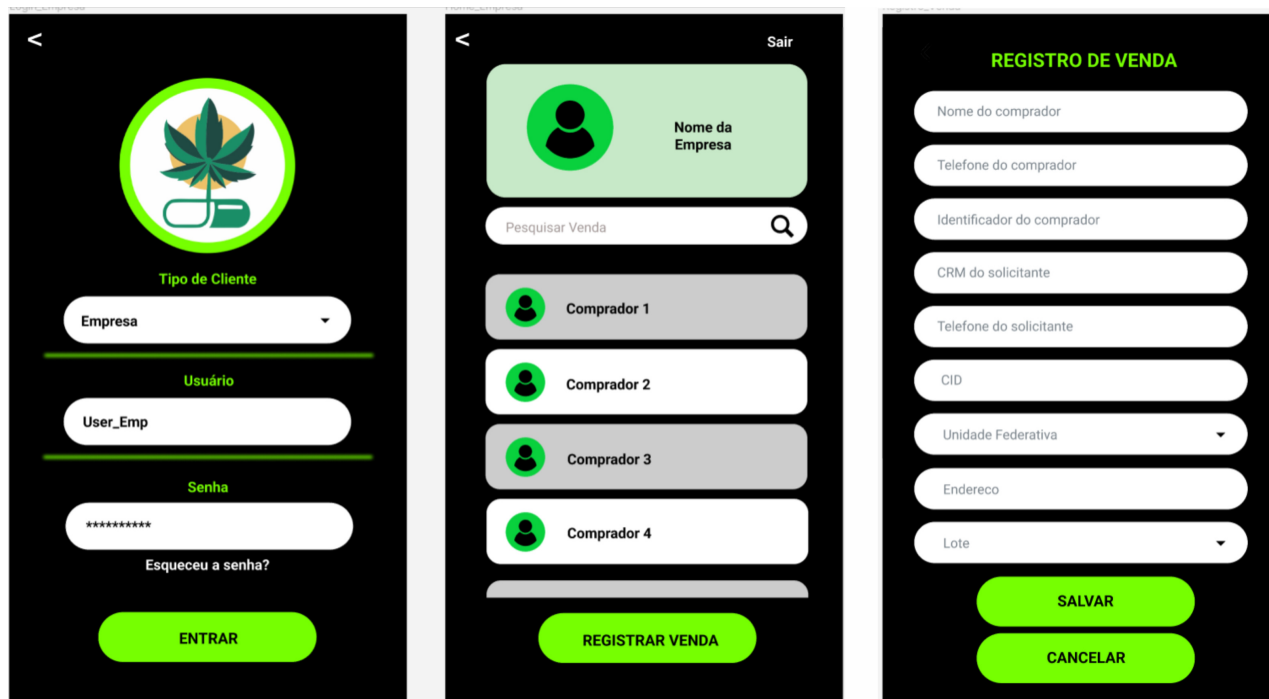

The image displays three sequential mobile application screens for a company client registration process. The first screen, titled 'Tipo de Cliente', features a logo at the top and input fields for 'Empresa', 'User_Emp', and 'Senha', with an 'ENTRAR' button at the bottom. The second screen, titled 'Sair', shows a list of buyers ('Comprador 1' through 'Comprador 4') and a 'REGISTRAR VENDA' button. The third screen, titled 'REGISTRO DE VENDA', contains a series of input fields for buyer and applicant information, followed by 'SALVAR' and 'CANCELAR' buttons.

Tela 1: Tipo de Cliente

- Logo (Cannabis leaf and scales)
- Tipo de Cliente: Empresa
- Usuário: User_Emp
- Senha: [Masked]
- Esqueceu a senha?
- ENTRAR

Tela 2: Sair

- Nome da Empresa
- Pesquisar Venda
- Comprador 1
- Comprador 2
- Comprador 3
- Comprador 4
- REGISTRAR VENDA

Tela 3: REGISTRO DE VENDA

- Nome do comprador
- Telefone do comprador
- Identificador do comprador
- CRM do solicitante
- Telefone do solicitante
- CID
- Unidade Federativa
- Endereco
- Lote
- SALVAR
- CANCELAR

Clique em "Registrar venda" escreva os registros

- 1- Nome do comprador
- 2- Telefone do comprador
- 3- Identificador do comprador
- 4- CRM do solicitante
- 5- Telefone do solicitante
- 6- CID
- 7- Unidade Federativa
- 8- Endereço para remessa
- 9- Lote do produto



1.6 Garantia do produto

O seu produto Extrator de Canabinóides é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao cliente, sendo:

3 meses - garantia legal;

9 últimos meses - garantia especial.

A garantia compreende a substituição gratuita dos produtos para defeitos constatados como sendo de fabricação.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- Ocorrerm mau uso, má conservação, descuido, modificações estéticas e/ou funcionais;
- Houver sinais de violação e/ou adulteração do produto.

As garantias não cobrem:

Danos no produto decorrentes do excesso de carga nos reservatórios, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou outros animais), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao propósito e finalidade de utilização;

Produtos ou acessórios que tenham sido danificados em consequência de quedas causadas pelo próprio cliente ou por terceiros

1.7 Suporte ao produto

Em caso de dúvidas ou de problemas no produto e respectivos acessórios, entre em contato com a Central de Relacionamento. Ao ligar tenha em mão informações de CPF e nome do comprador



+55 (xx) xxxxx-xxxx

1.8 Dados Gerais

Matéria-prima estrutura: Alumínio

Matéria-prima recipientes: Aço Inox 304

Comprimento: 230 milímetros

Largura: 440 milímetros

Altura: 1200 milímetros

Capacidade de armazenamento recipiente: 2,5 L

Capacidade de armazenamento Becker: 2,9 litros

Peso: 35,5 kg